


Kit Cirúrgico para Discografia

Registro ANVISA N° 80371259007



Manômetro Digital

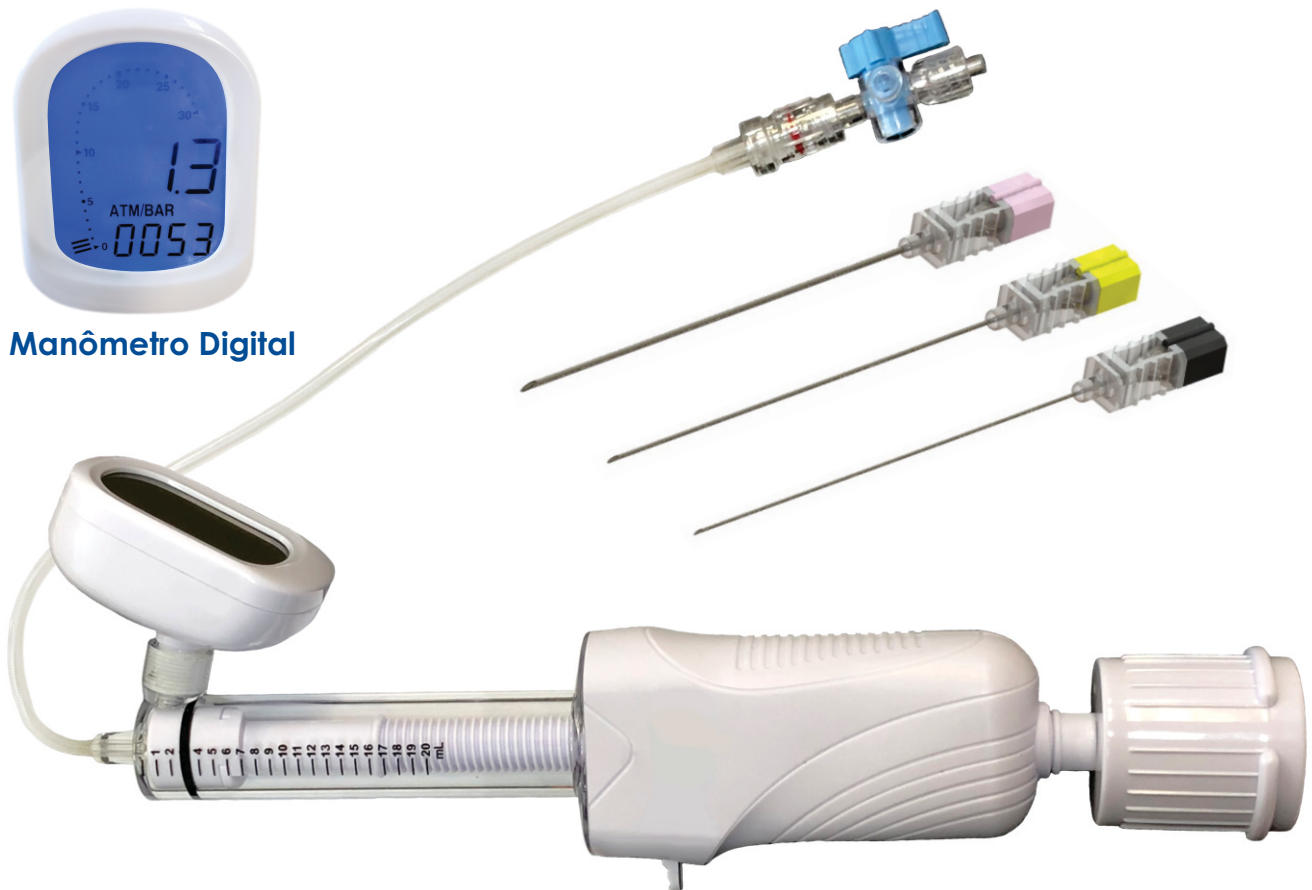

O Kit Cirúrgico para Discografia é um produto estéril, destinado ao apoio em procedimento para a detecção de doenças degenerativas e danos estruturais nos discos intervertebrais da coluna vertebral.

O Kit Cirúrgico para Discografia da BIOTECK foi desenvolvido para avaliar a pressão no interior do disco intervertebral durante o procedimento de discografia, útil para o diagnóstico de dores crônicas (se discogênica, facetária ou mista) e doenças degenerativas da coluna vertebral, utilizando o insuflador e a cânula, a qual fará o caminho do líquido (contraste) do corpo do insuflador até o interior do disco intervertebral. O dispositivo indicará a pressão inicial do disco intervertebral do paciente assim que puncionado, dando parâmetros ao médico para iniciar o procedimento. A pressão é atualizada automaticamente na tela do manômetro digital durante a injeção do contraste, e o médico ainda acompanha o volume injetado através da graduação impressa em ml no corpo do insuflador.

Formas de Apresentação	
Código (REF)	Modelos
KCIRDI001	KIT CIRÚRGICO PARA DISCOGRAFIA COM AGULHAS 18G/20G/22G
KCIRDI002	KIT CIRÚRGICO PARA DISCOGRAFIA COM AGULHAS 22G/24G/26G

Cada modelo contém 01 insuflador com manômetro digital, 01 conector de 3 vias, e 03 agulhas canuladas. Fornecido estéril, por Óxido de Etileno (ETO), em embalagem primária e secundária do tipo tubular, compostas por papel grau cirúrgico + filme poliéster e polipropileno, reembalada em embalagem terciária do tipo caixa cartonada.

O produto é fornecido estéril.

O método de esterilização adotado é a esterilização a gás por Óxido de Etileno (ETO), conforme norma ABNT NBR 15245 - Produtos para Saúde - Validação e Controle de Rotina de Esterilização por Óxido de Etileno.

Contatos



bioteckimplants.com

Distribuidor